

# Heka

Shiatsu naprava za  
masiranje ramen

# Varnostna navodila

Pri uporabi izdelka UVI Heka upoštevajte vsa navodila in previdnostne ukrepe, navedene v priročniku za uporabo. UVI Heka ne zdravi kroničnih bolečin, vendar ima lahko ob pravilni uporabi terapevtske učinke. V primeru prekomerne ali nepravilne uporabe lahko povzroči poškodbe. Pred uporabo izdelka svetujemo posvet z zdravnikom ali s strokovnjakom.

## Pred prvo uporabo izdelka preberite vsa varnostna navodila in opozorila!



Izdelka ne uporabljajte pod odejo ali blazino. Pustite, da se toplota odvaja, sicer se lahko izdelek pregreje, kar lahko privede do poškodb, električnega udara ali požara.



Ne uporabljajte v prostoru z visoko temperaturo ali vlago, saj lahko pride do električnega udara ali požara. V primeru da se produkt pregreje ga izklopite ter pustite mirovati vsaj 30 minut.





Izdelka UVI Heka ne smejo uporabljati otroci ter ljudje s kroničnimi boleznimi, zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi. Nosečnice se morajo pred uporabo posvetovati z zdravnikom.





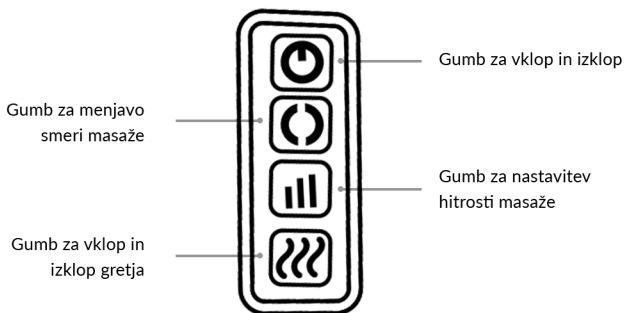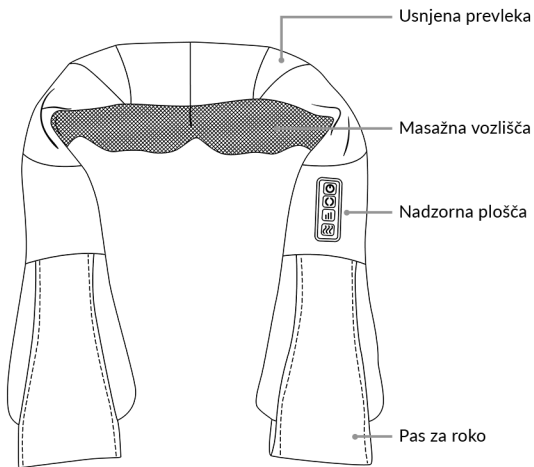

Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite. Ko je izdelek priključen na električni tokokrog, ga ne puščajte brez nadzora. Nikoli ga ne uporabljajte med spanjem ali dremanjem.

# Izdelek



# Navodila za uporabo

1. S polnilcem priključite masažno blazino v električno in pritisnite gumb za vklop .
2. Za vklop gretja pritisnite gumb . Ko je funkcija gretja vklopljena, masažna vozlišča svetijo rdeče.
3. Masažna blazina UVI Heka samodejno spremeni smer masaže vsakih 60 sekund. Če želite smer masaže spremeniti ročno, pritisnite gumb .
4. Za spremembo hitrosti masaže pritisnite gumb . Na voljo so tri različne hitrosti.



# Nasveti in opozorila

1. Ob prvi uporabi izdelka omejite čas uporabe na 5 minut ali manj, da se vaše telo prilagodi izkušnji z izdelkom.
2. Najdaljši priporočen čas uporabe izdelka je 30 minut. Po končanih 30 minutah počakajte vsaj 15 minut pred ponovno uporabo. Pretirana uporaba lahko povroči pregrevanje, poškodbe izdelka ali skrajša njegovo življenjsko dobo.
3. Za omilitev masažnega pritiska položite suho brisačo med seboj in izdelkom.
4. Izdelka ne uporabljajte, v kolikor imate otekline, vneto ali občutljivo kožo, ali odprto rano.
5. Izdelek UVI Heka ni namenjen medicinski uporabi. Uporabljajte ga samo za predvideni namen in kot je opisano v navodilih za uporabo. Pred uporabo UVI Heka se posvetujte s svojim zdravnikom.

# Čiščenje in shranjevanje



Izdelek shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi med 15 in 30 stopinj celzija in pri relativni vlažnosti med 30 in 70 %. Izdelek naj ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi in prahu.



Pred čiščenjem se prepričajte, da je izdelek UVI Heka izklopljen in da je polnilec izvlečen iz električne vtičnice. Za čiščenje PU usnja uporabite suho krpo.



Da bi preprečili poškodbe in razbarvanje, izdelka ne čistite z jedkim čistilom. Izdelka ne umivajte v pralnem stroju in ga hranite stran od vode.



Na masažne glave ne pritiskajte pretirano. Če uporabite prekomerno silo (nad 50 kilogramov), lahko poškodujete izdelek in razveljavite garancijo.

V primeru težav ali dodatnih vprašanj nam lahko pišete na [info@uvi.gg](mailto:info@uvi.gg). Več informacij o tem, kako uporabljati izdelek UVI Heka, lahko najdete na naši spletni strani [www.UVI.gg](http://www.UVI.gg).

LEGIT d.o.o., Brnčičeva 13,  
Črnuče-Ljubljana, Slovenia

